




corpuls®

FOCUS - ON - PATIENTS

RU

КАТАЛОГ
КОНФИГУРАЦИЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ

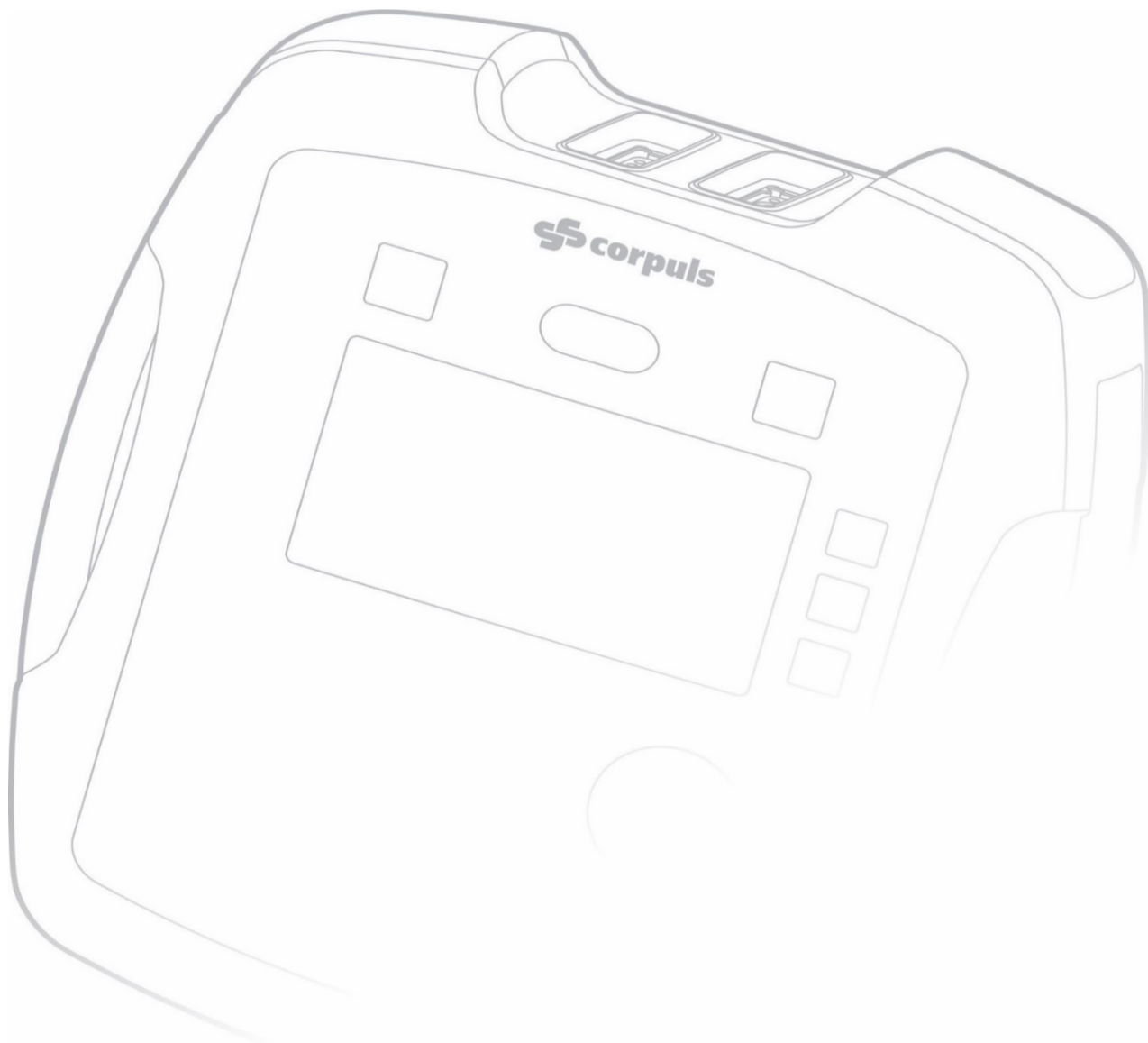

Corpuls **aed**

КОНФИГУРАЦИИ & ПРИНАДЛЕЖНОСТИ



ОГЛАВЛЕНИЕ




Конфигурации дефибриллятора Corpuls AED	3
Принадлежности для дефибрилляции и терапии	5
Принадлежности для крепления	7
Принадлежности для хранения и переноски	8
Дополнительные принадлежности	9
Управление информацией	11



corpuls®

CORPULS AED

Конфигурации дефибриллятора Corpuls AED

Артикул	Описание	
06101.10	<p>Дефибриллятор corpuls aed (полуавтоматический)</p> <p>Полуавтоматический дефибриллятор для непрофессионала с отображением ЭКГ в одном отведении.</p> <p>Автоматический (или по решению пользователя) анализ и подача разряда.</p> <ul style="list-style-type: none">• Голосовые и текстовые инструкции• Степень защиты от пыли водяных брызг - IP66• Запись голосовых сообщений• Функция «smartMetronome» (умный метроном)• Подключение к беспроводной сети WLAN• Поддержка различных языков <p>06100.10 - Исполнение с функцией обратной связи CPR</p>	
06101.11	<p>Дефибриллятор corpuls aed (полуавтоматический) с функцией экстренного вызова по GSM</p> <p>Полуавтоматический дефибриллятор для непрофессионала с отображением ЭКГ в одном отведении.</p> <p>Автоматический (или по решению пользователя) анализ и подача разряда.</p> <ul style="list-style-type: none">• Голосовые и текстовые инструкции• Степень защиты от пыли водяных брызг - IP66• Запись голосовых сообщений• Функция «smartMetronome» (умный метроном)• Подключение к беспроводной сети WLAN• Поддержка различных языков <p>06100.11 - Исполнение с функцией обратной связи CPR</p>	
06101.20	<p>Дефибриллятор corpuls aed (автоматический)</p> <p>Полностью автоматический дефибриллятор для непрофессионала с инструкциями в виде пиктограмм.</p> <p>Анализ и подача разряда происходит без вмешательства пользователя.</p> <ul style="list-style-type: none">• Голосовые и текстовые инструкции• Степень защиты от пыли водяных брызг - IP66• Запись голосовых сообщений• Функция «smartMetronome» (умный метроном)• Подключение к беспроводной сети WLAN <p>06100.20 - Исполнение с функцией обратной связи CPR</p>	



corpuls®

CORPULS AED

Артикул

Описание

06101.21

Дефибриллятор corpuls aed (автоматический) с функцией экстренного вызова по GSM

Полностью автоматический дефибриллятор для непрофессионала с инструкциями в виде пиктограмм.

Анализ и подача разряда происходит без вмешательства пользователя.

- Голосовые и текстовые инструкции
- Степень защиты от пыли водяных брызг - IP66
- Запись голосовых сообщений
- Функция «smartMetronome» (умный метроном)
- Подключение к беспроводной сети WLAN
- Поддержка различных языков

06100.21 - Исполнение с функцией обратной связи CPR



06101.22

Дефибриллятор corpuls aed (автоматический)

Полностью автоматический дефибриллятор для непрофессионала с инструкциями в виде пиктограмм.

Анализ и подача разряда происходит без вмешательства пользователя.

- Голосовые и текстовые инструкции
- Степень защиты от пыли водяных брызг - IP66
- Запись голосовых сообщений
- Функция «smartMetronome» (умный метроном)
- Подключение к беспроводной сети WLAN
- Поддержка различных языков

06100.22 - Исполнение с функцией обратной связи CPR













corpuls

CORPULS AED

Принадлежности для дефибрилляции и терапии

Артикул	Описание	
04324.3	<p>Электрод терапевтический corPatch easy одноразовый для дефибрилляции / кардиостимуляции с кабелем (10 шт. в упаковке)</p> <p>Электроды corPatch easy могут использоваться для дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ у взрослых и детей.</p> <p>Кабель отведений уже предварительно подключен к электроду и может быть подключен к блоку дефибриллятора после вскрытия упаковки электрода через соединительный терапевтический кабель (арт. 04326.0).</p> <p>Срок хранения: 30 месяцев</p>	
05120.1	<p>Электрод терапевтический corPatch easy pre-connected одноразовый для дефибрилляции / кардиостимуляции с наружным кабелем (10 шт. в упаковке)</p> <p>Электроды corPatch easy pre-connected можно использовать для дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ у новорожденных и младенцев.</p> <p>Кабель отведений уже предварительно подключен к электроду и может быть подключен к блоку дефибриллятора до вскрытия упаковки электрода через соединительный терапевтический кабель (арт. 04326.0).</p> <p>Срок хранения: 36 месяцев</p>	
05120.4	<p>Электрод терапевтический corPatch easy Pro одноразовый для дефибрилляции / кардиостимуляции с наружным кабелем</p> <p>Электроды corPatch easy Pro можно использовать для дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ у взрослых.</p> <p>Кабель отведений уже предварительно подключен к электроду и может быть подключен к блоку дефибриллятора до вскрытия упаковки электрода через соединительный терапевтический кабель (арт. 04326.0).</p> <p>Срок хранения: 36 месяцев</p>	
05120.40	<p>Электрод терапевтический corPatch easy Pro одноразовый для дефибрилляции / кардиостимуляции с наружным кабелем (10 шт. в упаковке)</p> <p>Электроды corPatch easy Pro можно использовать для дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ у взрослых.</p> <p>Кабель отведений уже предварительно подключен к электроду и может быть подключен к блоку дефибриллятора до вскрытия упаковки электрода через соединительный терапевтический кабель (арт. 04326.0).</p> <p>Срок хранения: 36 месяцев</p>	



Артикул	Описание	
05120.5	Электрод терапевтический corPatch easy pre-connected одноразовый для дефибрилляции / кардиостимуляции с наружным кабелем Электроды corPatch easy pre-connected можно использовать для дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ у взрослых. Кабель отведений уже предварительно подключен к электроду и может быть подключен к блоку дефибриллятора до вскрытия упаковки электрода через соединительный терапевтический кабель (арт. 04326.0). Срок хранения: 36 месяцев	
05120.50	Электрод терапевтический corPatch easy pre-connected одноразовый для дефибрилляции / кардиостимуляции с наружным кабелем (10 шт. в упаковке) Электроды corPatch easy pre-connected можно использовать для дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ у взрослых. Кабель отведений уже предварительно подключен к электроду и может быть подключен к блоку дефибриллятора до вскрытия упаковки электрода через соединительный терапевтический кабель (арт. 04326.0). Срок хранения: 36 месяцев	
05120.3	Электрод терапевтический corPatch easy Pediatric extended одноразовый для дефибрилляции / кардиостимуляции с кабелем (10 шт. в упаковке) Электроды corPatch easy Pediatric extended можно использовать для дефибрилляции, синхронизированной кардиоверсии, кардиостимуляции и мониторинга ЭКГ у новорожденных и младенцев. Имеет увеличенный срок хранения. Кабель отведения уже предварительно подключен к электроду и может быть подключен к блоку дефибриллятора после вскрытия упаковки электрода через соединительный терапевтический кабель (арт. 04326.0). Срок хранения: 36 месяцев	
04326.0	Кабель соединительный терапевтический Кабель соединительный терапевтический предназначен для подключения терапевтических электродов corPatch easy для дефибрилляции / кардиостимуляции / мониторинга ЭКГ и разрядных электродов к дефибриллятору corpuls aed .	







Принадлежности для крепления

Артикул	Описание	
06400.1	<p>Кронштейн настенный для крепления дефибриллятора с лотком для электродов Для надежного крепления дефибриллятора на стене в помещении</p> <p>Применяется для крепления: Дефибриллятора corpuls aed с лотком для хранения электродов (арт. 06122.1) Дефибриллятора corpuls aed с увеличенным лотком XL для хранения электродов (арт. 06122.2)</p>	
06400.11	<p>Кронштейн настенный для крепления дефибриллятора с лотком для электродов в автотранспорте – EN1789 Для надежного крепления corpuls aed в автотранспорте. Дополнительная фиксация corpuls aed с помощью застегивающейся лямки.</p> <p>Применяется для крепления: Дефибриллятора corpuls aed с лотком для хранения электродов (арт. 06122.1) Дефибриллятора corpuls aed с увеличенным лотком XL для хранения электродов (арт. 06122.2)</p>	
06400.2	<p>Кронштейн настенный для крепления дефибриллятора с чехлом для принадлежностей Для надежного крепления дефибриллятора на стене в помещении</p> <p>Применяется для крепления: Дефибриллятора corpuls aed в чехле для принадлежностей (арт. 06121.2)</p>	
06400.21	<p>Кронштейн настенный для крепления дефибриллятора с чехлом для принадлежностей в автотранспорте – EN1789 Для крепления corpuls aed в автотранспорте. Дополнительная фиксация corpuls aed с помощью застегивающейся лямки</p> <p>Применяется для крепления: Дефибриллятора corpuls aed в чехле для принадлежностей (арт. 06121.2)</p>	



Принадлежности для хранения и переноски

Артикул	Описание	
06121.3	Чехол для дефибриллятора и принадлежностей Для хранения, переноски и удобства применения дефибриллятора corpuls aed с электродами corPatch easy .	
06122.1	Лоток для хранения электродов Для хранения электродов corPatch easy на задней части дефибриллятора corpuls aed Предназначен для хранения предварительно подключенных электродов corPatch easy (арт. № 05120.1) на задней стороне corpuls aed	
06122.2	Лоток увеличенный XL для хранения электродов Для хранения электродов corPatch easy на задней части дефибриллятора corpuls aed Предназначен для хранения предварительно подключенных электродов corPatch easy (арт. № 05120.1) на задней стороне corpuls aed	
06123.1	Рюкзак для переноски дефибриллятора и принадлежностей в экстренных случаях Рюкзак предназначен для переноски и возможности применения дефибриллятора в экстренных случаях corpuls aed . Возможно дополнительное хранение небольшого спасательного оборудования и аксессуаров.	





corpuls®

CORPULS AED

Дополнительные принадлежности

Артикул	Описание	
04311	Симулятор corpuls Симулятор corpuls используется для функциональной проверки дефибриллятора corpuls aed и гарантирует правильное функционирование дефибриллятора. Выполнив разряд полной мощности в симулятор corpuls , можно проверить функциональность блока дефибрилляции.	
04311.1	Симулятор corpuls НК Симулятор corpuls НК служит для функциональной проверки дефибрилляторов corpuls aed/corpuls3/corpuls1 с учетом дефибрилляции и генерации следующих сигналов: желудочковой тахикардии (VT), асистолия, синусовый ритм (STEMI), желудочковой фибрилляции (VF), брадикардия.	
70763.0010	Накладка защитная для экрана Эта наклейка предотвращает появление царапин и других повреждений ЖК-дисплея.	
06120	Аккумуляторная батарея (LiMn) 12 V / 4.8 Ah Мощная аккумуляторная батарея для corpuls aed . Срок службы батареи 5 лет В режиме обратной связи «CPR» батарея рассчитана на 12-15 часов работы Батарея рассчитана на 220 разрядов	
06120.1	Аккумуляторная батарея тренировочная – Не для использования на пациентах! Мощная батарея тренировочного назначения для corpuls aed При полной зарядке можно осуществить около 100 разрядов Аксессуар для тренировок, совместимый как с дефибриллятором corpuls3 так и с corpuls1 Батарея имеет потенциал и создает электрическое напряжение	
06510	Адаптер питания для зарядки тренировочных аккумуляторов В состав включены адаптеры для розеток по стандартам ЕС, США, Великобритании и Австралии.	










Артикул	Описание	
04325.51	<p>Кабель-адаптер для тренировочного манекена Laerdal / Ambu</p> <p>Позволяет проводить реалистичные тренировки на распространенных манекенах Ambu и Laerdal.</p> <p>Требуется промежуточный кабель (арт. 04326.0) для подключения к corpuls aed.</p>	
06130.# / 06230.#	<p>Инструкции по применению для corpuls aed</p> <ul style="list-style-type: none">⇒ 06130.01 German (инструкция по применению)⇒ 06130.02 English (инструкция по применению)⇒ 06230.01 German (инструкция по сервисному обслуживанию)⇒ 06230.02 English (инструкция по сервисному обслуживанию)	



corpuls®

CORPULS AED

Управление информацией

Артикул	Описание	
06100.31	Опция SIM-карта M2M для экстренного вызова по GSM (на 1 год) Только совместно с дефибрилляторами (арт. 06100.11 / 21 и 06101.11 / 21)	
06100.32	Опция SIM-карта M2M для экстренного вызова по GSM (на 3 года) Только совместно с дефибрилляторами (арт. 06100.11 / 21 и 06101.11 / 21)	
06100.33	Опция SIM-карта M2M для экстренного вызова по GSM (на 5 лет) Только совместно с дефибрилляторами (арт. 06100.11 / 21 и 06101.11 / 21)	
06100.41	Пакет СМС-оповещений (короткий (на 48ч) / на 1 год) corpuls.manager ADMIN Если пакет СМС используется совместно с дефибрилляторами арт. 06100.11 или арт.06100.21 (опция GSM), SIM-карту (арт. 06100.31) необходимо заказывать отдельно	
06100.42	Пакет СМС-оповещений (короткий (на 48ч) / на 3 года) corpuls.manager ADMIN Если пакет СМС используется совместно с дефибрилляторами арт. 06100.11 или арт.06100.21 (опция GSM), SIM-карту (арт. 06100.32) необходимо заказывать отдельно	
06100.43	Пакет СМС-оповещений (короткий (на 48ч) / на 5 лет) corpuls.manager ADMIN Если пакет СМС используется совместно с дефибрилляторами арт. 06100.11 или арт.06100.21 (опция GSM), SIM-карту (арт. 06100.33) необходимо заказывать отдельно	
06100.44	Пакет СМС-оповещений (средний (на 48ч) / на 1 год) corpuls.manager ADMIN Если пакет СМС используется совместно с дефибрилляторами арт. 06100.11 или арт.06100.21 (опция GSM), SIM-карту (арт. 06100.31) необходимо заказывать отдельно	



Артикул	Описание	
06100.45	Пакет СМС-оповещений М (на 3 года) corpuls.manager ADMIN Если пакет СМС используется совместно с дефибрилляторами арт. 06100.11 или арт.06100.21 (опция GSM), SIM-карту (арт. 06100.32) необходимо заказывать отдельно	
06100.46	Пакет СМС-оповещений М (на 5 лет) corpuls.manager ADMIN Если пакет СМС используется совместно с дефибрилляторами арт. 06100.11 или арт.06100.21 (опция GSM), SIM-карту (арт. 06100.33) необходимо заказывать отдельно	
06100.47	Пакет СМС-оповещений L (на 1 год) corpuls.manager ADMIN Если пакет СМС используется совместно с дефибрилляторами арт. 06100.11 или арт.06100.21 (опция GSM), SIM-карту (арт. 06100.31) необходимо заказывать отдельно	
06100.48	Пакет СМС-оповещений L (на 3 года) corpuls.manager ADMIN Если пакет СМС используется совместно с дефибрилляторами арт. 06100.11 или арт.06100.21 (опция GSM), SIM-карту (арт. 06100.32) необходимо заказывать отдельно	
06100.49	Пакет СМС-оповещений L (на 5 лет) corpuls.manager ADMIN Если пакет СМС используется совместно с дефибрилляторами арт. 06100.11 или арт.06100.21 (опция GSM), SIM-карту (арт. 06100.33) необходимо заказывать отдельно	
97031	Программное обеспечение для ПК corpuls.manager REVIEW	
97051	Программное обеспечение corpuls.manager ANALYSE server разовое	



Артикул	Описание	
97051.1	Лицензия для устройства corpuls3 (годовая) corpuls.manager ANALYSE (server)	
97051.13	Дополнение к лицензии для устройства (на 3 года) corpuls.manager ANALYSE (server): панель управления	
97056	Программное обеспечение corpuls.manager ANALYSE cloud setup для установки облачного хранилища разовое	
97056.1	Лицензия для устройства corpuls (годовая) corpuls.manager ANALYSE (cloud)	
97056.13	Дополнение к лицензии (годовое) corpuls.manager ANALYSE (cloud): панели управления	
97052	Программное обеспечение corpuls.manager ADMIN server разовое	
97052.1	Премиум-лицензия для устройства (годовая) corpuls.manager ADMIN (server) premium	



Артикул	Описание	
97052.11	Стандартная лицензия для устройства (годовая) corpuls.manager ADMIN (server) standard	
97053	Программное обеспечение для установки облачного хранилища corpuls.manager ADMIN cloud setup разовое	
97053.1	Премиум-лицензия для устройства (годовая) corpuls.manager ADMIN premium	
97053.11	Стандартная лицензия для устройства (годовая) corpuls.manager ADMIN (cloud) standard	
97053.12	Базовая лицензия для устройства (разовая до 10 лет) corpuls.manager ADMIN (cloud)	
97059.1	Приложение для мобильной операционной системы iOS corpuls.manager App (iOS)	corpuls.manager 
97059.2	Приложение corpuls.manager для мобильной операционной системы Android corpuls.manager App (Android)	corpuls.manager 



Производитель:

GS Elektromedizinische Geräte G. Stemple GmbH
Hauswiesenstr. 26 | 86916 Kaufering | Германия

Тел.: + 49 8191 657220-0

Факс: + 49 8191 65722-22

E-mail: info@corpuls.com

Web: www.corpuls.world



Продукты могут быть доступны не на всех рынках, поскольку доступность продуктов зависит от нормативных и/или медицинских норм на отдельных рынках. По вопросам доступности обращайтесь по адресу info@corpuls.com.

Возможны опечатки, а также изменения конструкции и дизайна. Все упомянутые названия продуктов являются зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.