

**Свидетельство о приемке**

Изделие и его составные части соответствуют требованиям  
ГО ВУ 190666709.009-2019 (ГОСТ 16371-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки \_\_\_\_\_

Бригада

**ОТК №2**  
**ЧУП «Артинокс»**




Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232



# ARTINOX

*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

**ПАСПОРТ  
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)**

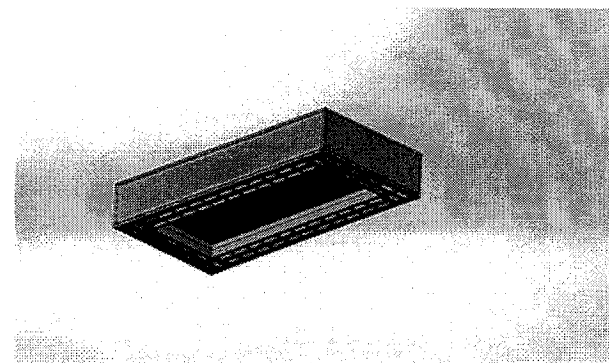

**Шкаф вытяжной лабораторный  
АТ-В013  
ГОСТ 16371-2014**

## Шкаф вытяжной лабораторный АТ-В013

### 1. Назначение

Шкаф навесной вытяжной с подсветкой предназначен для эксплуатации в лечебных учреждениях, патологоанатомических отделениях моргах, для подачи обеззараженного воздуха в рабочую зону.

### 2. Общая характеристика

Шкаф конструкционно выполнен из следующих элементов:

- каркас;
- крепежный фланец
- светильник.

### 3. Описание

Каркас и крепежный фланец: Жесткая, цельносварная конструкция, выполненная из нержавеющей холоднокатаного листового проката. марки AISI – 304, выгнутого особым способом, обеспечивающим изделию необходимую жесткость и прочность.

Наружные поверхности изделия устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции. Производительность: 750 м<sup>3</sup>/ч, воздушное сопротивление: 40 Па

Тяга: изменяемая, свет: 14 x 8 Ватт

Яркость: 3200 Lux на расстоянии 1,5м

Питание: 230 В / 50 Гц

Вентиляция диаметр: 2 x 200 мм

### 4. Упаковка, транспортировка и хранение

Изделие обернуто бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, либо упаковано в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотопливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2°C при относительной влажности от 45 до 70%. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию

### 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавеяка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

### 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (24 месяца) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### 7. Технические характеристики

Артикул	Габаритные размеры, Ш*Г*В, мм:	Примечание
АТ-В013	2400*1085*400	Крепежный фланец, 200

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.
2. Сертификат соответствия или Декларация соответствия
3. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015