

**Свидетельство о приемке**

Изделие и его составные части соответствуют требованиям ТО ВУ 190666709.009-2019 (ГОСТ 16371-2014) и признано годным к эксплуатации.

Дата выпуска и упаковки


Бригада



# ARTINOX

*Медицинская металлическая мебель собственного производства*

**ПАСПОРТ  
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)**

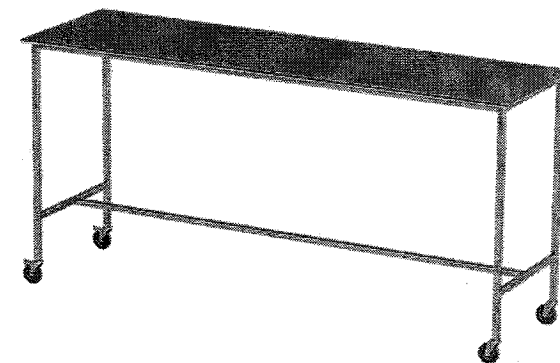

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,  
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район  
д. Михановичи  
Телефон: +375175415232

**Стол операционный (Боброва) АТ-В20  
ГОСТ 16371-2014**

## Стол операционный (Боброва) АТ-В20

### 1. Назначение

Стол используется в поликлиниках, больницах всех уровней и направлений, госпиталях, и предназначена для оборудования врачебных кабинетов узких специалистов, процедурных кабинетов, предоперационных и операционных и т.д.

### 2. Общая характеристика

Стол конструкционно выполнен из следующих элементов:

- каркас;
  - столешница;
  - колесные опоры диаметром 75 мм (либо без колес, по согласованию с заказчиком).
- Срок эксплуатации изделия – 2 года.

### 3. Описание

Каркас и столешница: Жесткая, цельносварная конструкция, из листового нержавеющей металла марки AISI – 304 толщиной 0,8 мм / 25\*25 мм, выпнутого особым способом обеспечивающим корпусу высокую эксплуатационную надежность.

Использование нержавеющей металлопроката позволяет значительно повысить эксплуатационную надежность изделия, его долговечность и удобство в эксплуатации. Наружные поверхности каркаса устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

### 3. Упаковка, транспортировка и хранение

Изделие обернуто стрейч-пленкой либо бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, и/или упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими straps для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2°C при относительной влажности от 45 до 70%. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

## 5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

## 6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (24 месяца) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

## 7. Технические характеристики

Артикул	Габаритные размеры	Примечание
АТ-В20	1900*550*900	возможно исполнение из металла в полимерном покрытии

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в размеры изделия (по согласованию с заказчиком), при условии, что данные изменения не влияют на основные потребительские свойства, эргономичность и качество.

*Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов*

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.
2. Сертификат соответствия или Декларация соответствия
3. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015