

# УВЛАЖНИТЕЛЬ МЕДИЦИНСКИХ ГАЗОВ

## ФЛОУМЕТР С СЕЛЕКТОРОМ ПОТОК 0-15 л/мин



### Описание

Переменный флоуметр со встроенным переключателем для дозирования кислорода со шкалой от 0 до 15 л/мин оснащен переключателем для выбора желаемой подачи кислорода; осушение через шланговое соединение или через увлажнитель воздуха. Он может быть подключен к медицинской газораспределительной системе с помощью подходящих штекеров AFNOR NF S 90-116, DIN 13260-1, UNI 9507, BS 5682, SS или с разъема G 1/4 "MR; также доступен с зажимом ABS для крепления на рельс с подходящим газовым соединением. Устройство позволяет за счет регулирования игольчатого клапана обеспечить расход от 0 до 15 л/мин при давлении 4,5 бар (с разбежкой до 0,5 бар).

### Нормативы

NF S 90-116 | EN ISO 14971: 2012 | UNI 9507: 2004 | UNI EN ISO 15002: 2008 | DIN 13260-2 | EN ISO 15001: 2012 | SS 8752430: 2017

### Компоненты

Алюминиевый корпус с химическим никелированием.

Поплавков из нержавеющей стали AISI 316.

Одно входное отверстие со штекером стандарта DIN или резьбой G 1/4 "MR.

Одно выходное отверстие с резьбой G 1/4" MR.

Ручка регулятора из латуни с клеммным блоком NYLON 6.6.

Внутренняя градуированная поворотная измерительная колонка и внешняя колонка из поликарбоната MAKROLON 2458



ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65



[www.flowmedical.by](http://www.flowmedical.by)

E-mail: [info@flowmedical.by](mailto:info@flowmedical.by)

## Технические характеристики

| КОД    | ГАЗ                     | ВПУСКНОЕ<br>СОЕДИНЕНИЕ | ПОДКЛЮЧЕНИЕ<br>К<br>УВЛАЖНИТЕЛЮ | ДЕРЖАТЕЛЬ<br>ДЛЯ ШЛАНГА | ОБЪЁМ      | БАР |
|--------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|-------------------------|------------|-----|
| HF085  | КИСЛОРОД                | G 1/4" М               | G 1/4" М                        | Ø 6 mm                  | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF086  | КИСЛОРОД                | UNI 9507               | G 1/4" М                        | Ø 6 mm                  | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF087  | КИСЛОРОД                | AFNOR NF S 90-116      | G 1/4" М                        | Ø 6 mm                  | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF088  | КИСЛОРОД                | DIN 13260-2            | G 1/4" М                        | Ø 6 mm                  | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF089  | КИСЛОРОД                | BS 5682                | G 1/4" М                        | Ø 6 mm                  | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF089A | КИСЛОРОД                | SS 8752430             | G 1/4" М                        | Ø 6 mm                  | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF117  | O2, на рельс со шлангом | UNI 9507               | G 1/4" М                        | Ø 6 mm                  | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF118  | O2, на рельс со шлангом | AFNOR NF S 90-116      | G 1/4" М                        | Ø 6 mm                  | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF119  | O2, на рельс со шлангом | DIN 13260-2            | G 1/4" М                        | Ø 6 mm                  | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF120  | O2, на рельс со шлангом | BS 5682                | G 1/4" М                        | Ø 6 mm                  | 0-15 l/min | 4,5 |
| HF120A | O2, на рельс со шлангом | SS 8752430             | G 1/4" М                        | Ø 6 mm                  | 0-15 l/min | 4,5 |

## Технический чертёж

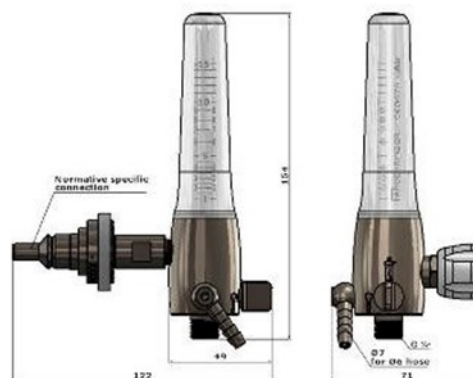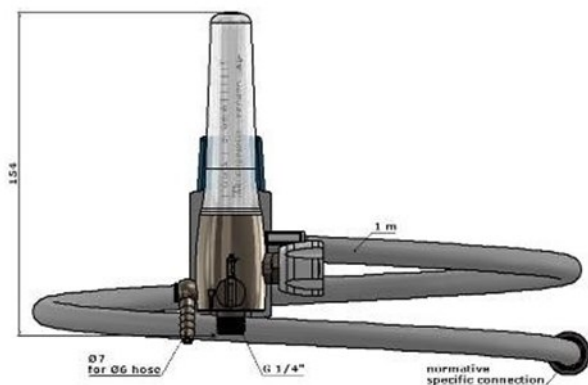

ООО «Флоумедикал»

220012, г. Минск, Республика Беларусь, пер. Инструментальный, д.6, пом.213

Тел/факс: 8(017) 350-61-65, 350-65-65

[www.flowmedical.by](http://www.flowmedical.by)

E-mail: [info@flowmedical.by](mailto:info@flowmedical.by)