


Свидетельство о приемке

Изделие и его составные части соответствуют требованиям ТУ ВУ 190666709.009-2019 (ГОСТ 16371-2014) и признано годным к эксплуатации.


Дата выпуска и упаковки

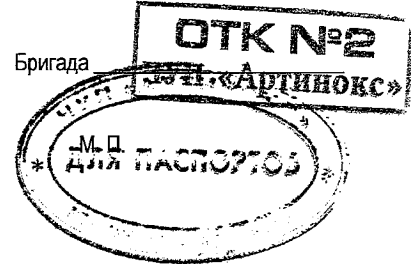

ARTINOX

Медицинская металлическая мебель собственного производства

**ПАСПОРТ
(ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ)**

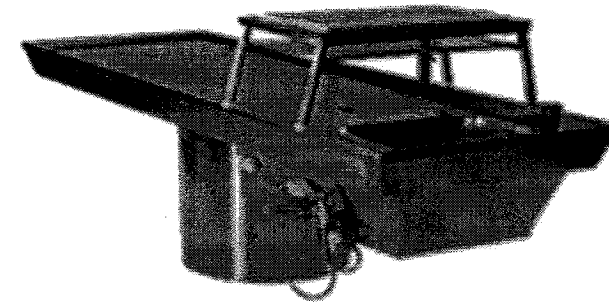

Изготовитель: АРТИНОКС ЧУП, Республика Беларусь,
Минская область, Минский р-н, Михановичский с/с 14, район
д. Михановичи
Телефон: +375175415232

**Стол патологоанатомический
серии АТ
ГОСТ 16371-2014**

Стол патологоанатомический АТ-В83

1. Назначение

Стол предназначен для эксплуатации в патологоанатомических учреждениях

2. Общая характеристика

Стол конструкционно выполнен из следующих элементов:

- каркас стола;
- препарационный столик;
- подголовник.

Изделие поставляется в собранном виде.

Срок эксплуатации изделия – 2 года.

3. Описание

Стол секционный патологоанатомический для проведения вскрытия (аутопсии) на одной центральной опоре. Допустимая нагрузка на стол не более 250 кг. Рабочая поверхность стола, его каркас и комплектующие изготовлены из высококачественной нержавеющей стали (типа AISI 304). Рабочая поверхность позволяет производить все необходимые манипуляции с максимальным удобством и безопасностью для персонала, высокие борта 40 мм. имеет навесные съемные перфорированные пластины для поддержания тела из нержавеющей стали (количество 5), оснащена системой ополаскивания рабочей поверхности. Конструкция секционного патологоанатомического стола имеет два слива: под раковиной и под ложем. Стол предусматривает систему отведения ядовитых примесей и неприятных запахов в вентиляционную систему, расположенную под рабочей поверхностью. По возможности предусматривать подсоединение к вентиляции здания для вывода воздуха отводами круглого или квадратного сечения по согласованию. Все поверхности стола легко очищаются и устойчивы к воздействию химических веществ. Стол укомплектован: электрической влагозащитной розеткой для подключения пилы патологоанатомической осциляторной (в комплект поставки не входит), ложе с мойкой - 1 комплект; съемные перфорированные площадки - 5 шт.; массивная тумба-основание - 1 комплект; подголовник, 1 шт.; столик препарационный (препаровочный) - 1 шт.; бак утилизации смывных вод - 1 шт. В комплект поставки каждого стола входит вся фурнитура для подключения к коммуникациям: смеситель локтевой - 1 комплект; гибкая подводка - 2 рукава; сетчатый излив (лейка с кнопкой) со шлангом - 1 шт.; кронштейн для сетчатого излива - 1 шт.; система слива жидкостей - 1 комплект; сифон - 2 шт. Препарационный столик: жесткая цельносварная конструкция из профильной нержавеющей трубы марки AISI - 304. Рабочая поверхность столика выполняется перфорированной и съемной для удобства эксплуатации.

Подголовник: жесткая, цельносварная конструкция, из листового нержавеющей металла марки AISI - 304, выгнутого особым способом обеспечивающим подголовнику высокую эксплуатационную надежность.

Использование нержавеющей металла позволяет значительно повысить эксплуатационную надежность изделия, его долговечность и удобство в эксплуатации. Наружные поверхности стола устойчивы к 1% раствору хлорамина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644, применяемым при дезинфекции.

4. Упаковка, транспортировка и хранение

Изделие обернуто стрейч-пленкой либо бумагой оберточной по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228, и/или упакована в картонную коробку.

Транспортировка изделия должно осуществляться в закрытых транспортных средствах любого типа, кроме неотапливаемых отсеков самолета, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для этих видов транспорта.

При транспортировании, погрузке, разгрузке необходимо руководствоваться манипуляционными знаками, выполненными на упаковке.

При транспортировании, изделие необходимо закрепить к кузову транспортного средства мягкими стропами для исключения повреждения изделия и смещения его по полу транспортного средства во время движения.

Условия транспортирования по группе 5(ОЖ4) ГОСТ15150

Изделия должны храниться в закрытом помещении при температуре не ниже +2°C при относительной влажности от 45 до 70%. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. Правила ухода

По возможности сокращать время воздействия агрессивных веществ и воды на поверхность изделия.

Следует периодически (при необходимости) затягивать ослабленные винтовые соединения.

При появлении царапин на рабочей поверхности (нержавейка), зачистить царапины наждачной бумагой (не крупнее 2000), до полного выведения с последующей полировкой.

Поверхности, окрашенные порошковыми красками, не требуют ухода и практичны в эксплуатации.

Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

6. Порядок предъявления претензий

Претензии по качеству и комплектности принимаются в течении 10 календарных дней с момента получения товара заказчиком.

Претензии от покупателя принимаются в течение гарантийного срока (24 месяца) при соблюдении условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил транспортировки, эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

7. Технические характеристики

Артикул	Габаритные размеры Д*Ш*В	Примечание
АТ-В83	2500-2600*740.....850*800....860	

Примечание: изготовитель оставляет за собой право вносить изменение в размеры изделия (по согласованию с заказчиком), при условии, что данные изменения не влияют на основные потребительские свойства, эргономичность и качество.

Документы, подтверждающие государственную регистрацию и соответствие продукции требованиям нормативных документов

1. Регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения Республики Беларусь.
2. Сертификат соответствия или Декларация соответствия
3. Сертификат качества по стандарту ISO 9001-2015