

МАГНИТОТЕРАПИЯ

BTL-4000 PROFESSIONAL



BTL-4920 MAGNET PROFESSIONAL

- 2 независимых канала магнитотерапии
- Одновременное подключение 2 аппликаторов
- Графический и цифровой экраны
- Предустановленные протоколы
- Портативность и работа от аккумулятора

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАГНИТОТЕРАПИИ BTL-4000 MAGNET PROFESSIONAL

МОДЕЛЬ	BTL-4920 Professional
Номер заказа	P4920.002
Экран	3,2"
Количество независимых каналов	2
Количество одновременно подключаемых аппликаторов	2
Максимальная интенсивность магнитного поля	128 мТл
Модуляция частоты	0-166 Гц
Размеры	160 × 140 × 350 мм
Вес	макс. 3 кг
Питание от сети	100-240 В, 50-60 Гц
Стандартные аксессуары	Адаптер, руководство пользователя

Опциональные аксессуары

Номер заказа P5900.001	Аппликатор диск	Номер заказа P5900.015	Фиксирующий ремень для магнитного аппликатора (двойной диск) 85 см
Номер заказа P5900.002	Аппликатор двойной диск	Номер заказа P5900.016	Фиксирующий ремень для магнитного аппликатора (мульти-диск) 190 см
Номер заказа P5900.003	Аппликатор мульти-диск	Номер заказа P5900.007	Кабель Удлинитель для магнитного аппликатора
Номер заказа P5900.004	Линейный аппликатор	Номер заказа P2000.006	Сумка для транспортировки
Номер заказа P5900.005	Соленоид 30 см	Номер заказа P5002.012	Тележка для BTL-4000
Номер заказа P5900.006	Соленоид 60 см		
Номер заказа P5900.013	Аппликатор кольцо		
Номер заказа P5900.017	Магнитотерапевтическая кушетка с соленоидом 70 см		
Номер заказа P5900.014	Фиксирующий ремень для магнитного аппликатора (диск) 60 см		

МАГНИТОТЕРАПИЯ


КЛИНИЧЕСКИЙ ОПЫТ

Магнитотерапия использует воздействие магнитной составляющей электромагнитного поля. Хорошо известные эффекты включают облегчение боли и ускорение заживляемости.

Для повышения безопасности во всех магнитотерапевтических аппликаторах работает технология Сфокусированного Магнитного Поля (FMF™). Технология FMF™ экранирует магнитное поле со стороны аппликатора, обращенной на медицинский персонал. В то время как пациенту проводится магнитотерапия, терапевт не подвергается воздействию магнитного поля.

Для магнитотерапии доступен широкий выбор аппликаторов. Дисковые аппликаторы предназначены в основном для лечения конечностей, в то время как большие соленоиды используются для лечения в области туловища.

ТЕХНОЛОГИЯ FMF™:

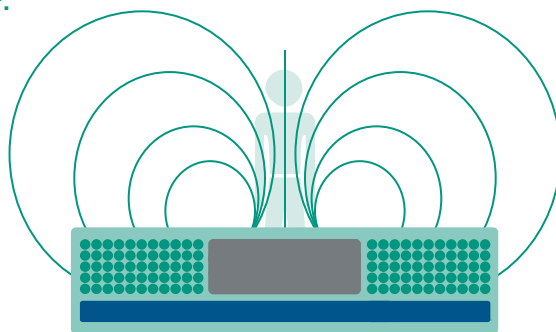


Магнитный аппликатор с технологией FMF™

- Генератор постоянного магнитного поля
- Генератор импульсного магнитного поля

● Отражатель FMF™

ОБЫЧНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ:

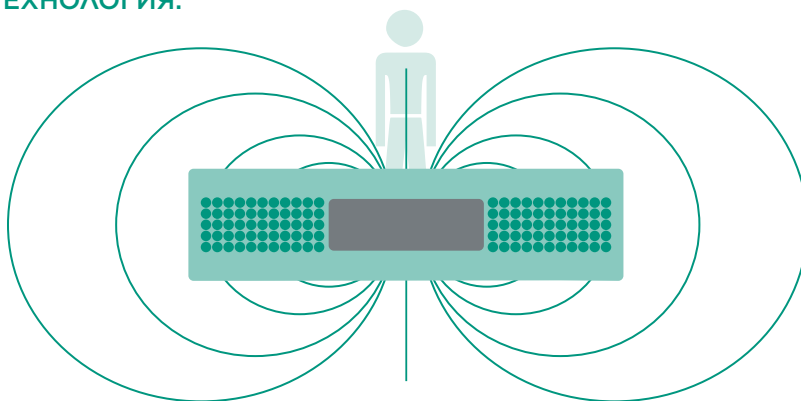

Стандартный магнитный аппликатор

- Генератор постоянного магнитного поля
- Генератор импульсного магнитного поля