



Изготовитель: УП «УНИКСФАРМ»

Республика Беларусь, 220108 г. Минск, ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к
тел: (+37517) 392-62-04, : (+37517) 392-62-05, факс: : (+37517) 318-29-87

Перчатки медицинские одноразовые «UNIFARM»

ТУ ВУ 190133324.003-2007

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование и варианты исполнений изделия медицинского назначения:

Перчатки медицинские одноразовые «UNIFARM»: смотровые латексные/нитриловые/синтетические, исследовательские/процедурные, нестерильные, пудренные/непудренные, текстурированные/гладкие, типоразмеры: классические, повышенной прочности/повышенной тактильной чувствительности/с удлиненной манжетой/ароматизированные/стоматологические.

Меры предосторожности:

Не использовать при нарушении целостности перчаток.

Латексные перчатки изготовлены из натурального латекса, который может вызывать аллергическую реакцию.


Указания по применению:

Перчатки предназначены для изоляции рук, обеспечивая необходимый уровень защиты пациента и пользователя во время проведения различных медицинских манипуляций.


Перчатки имеют следующие стандартные размеры: XS (сверхмалый), S (малый), M (средний), L (большой), XL (сверхбольшой).

Смотровые перчатки универсальные для обеих рук. Перчатки ОДНОРАЗОВЫЕ, повторное использование запрещено. Ногти должны быть коротко подстрижены. На руках должны отсутствовать предметы, которые могут нарушить целостность перчаток. Внимательно подбирайте размер перчаток. Медицинские перчатки должны плотно прилегать к рукам. Следует оберегать перчатки от механических повреждений.


ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ ПЕРЧАТОК

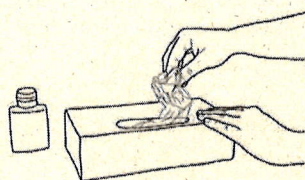


1. Достаньте перчатку из упаковки.

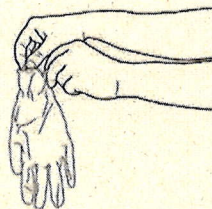


2. Прикасайтесь только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье (верхний край манжеты).

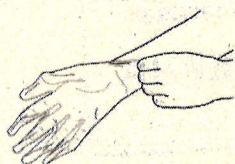

3. Наденьте первую перчатку

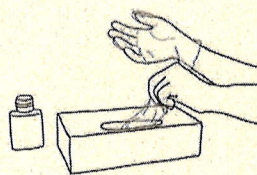

4. Возьмите вторую перчатку рукой без перчатки, при этом прикасайтесь к той части перчатки, которая будет находиться на запястье.

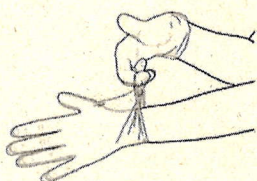


5. Чтобы избежать прикосновения руки с надетой перчаткой к коже предплечья, выверните наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в перчатке, это позволит вам надеть вторую перчатку.




6. После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток.


ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ ПЕРЧАТОК

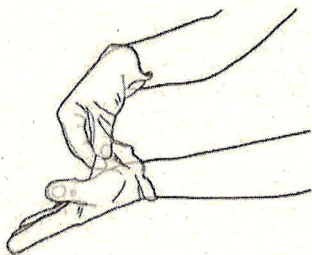

1. Захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, не притрагиваясь к коже предплечья, стягивайте ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.

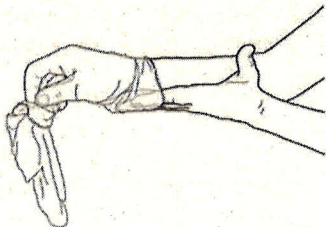

2. Держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подведите пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь – между второй перчаткой и запястьем. Снимите вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку.

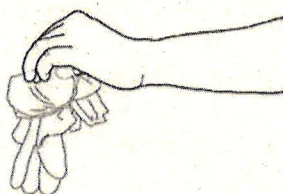

3. Утилизируйте перчатки в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Условия хранения: упакованные перчатки должны храниться в помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки транспортируются всеми видами крытых транспортных средств при температуре от минус 50°C до плюс 40°C. Использовать перчатки после транспортирования при минусовых температурах следует, выдержав их в упаковке в течение суток при температуре хранения. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину.

Срок годности нестерильных перчаток – 3 года.



Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM»

ТУ ВУ 190133324.003-2007

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование и варианты исполнений изделия медицинского назначения:

Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM»: смотровые латексные/нитриловые/синтетические, исследовательские/процедурные, стерильные, пудренные/непудренные, текстурированные/гладкие, типоразмеры: классические, повышенной прочности/повышенной тактильной чувствительности/с удлиненной манжетой/ароматизированные/стоматологические.

Меры предосторожности:

Не использовать при нарушении целостности перчаток и упаковки.

Латексные перчатки изготовлены из натурального латекса, который может вызывать аллергическую реакцию.

Указания по применению:

Перчатки предназначены для изоляции рук, обеспечивая необходимый уровень защиты пациента и пользователя во время проведения различных медицинских манипуляций.

Перчатки имеют следующие стандартные размеры: XS (сверхмалый), S (малый), M (средний), L (большой), XL (сверхбольшой).


Смотровые перчатки универсальные для обеих рук. Перчатки ОДНОРАЗОВЫЕ, повторное использование запрещено. Ногти должны быть коротко подстрижены. На руках должны отсутствовать предметы, которые могут нарушить целостность перчаток. Внимательно подбирайте размер перчаток. Медицинские перчатки должны плотно прилегать к рукам. Следует оберегать перчатки от механических повреждений.

ВНИМАНИЕ! Не использовать в инвазивной хирургии.

ВНИМАНИЕ! Стерильность гарантирована, если пакет не открыт или не имеет повреждений.

ВНИМАНИЕ! Перед применением пудренных перчаток опудривающее вещество должно быть удалено с поверхности в стерильных условиях до проведения процедур, чтобы свести к минимуму риск возникновения нежелательных реакций на тканях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ НАДЕВАНИЮ СТЕРИЛЬНЫХ ПЕРЧАТОК

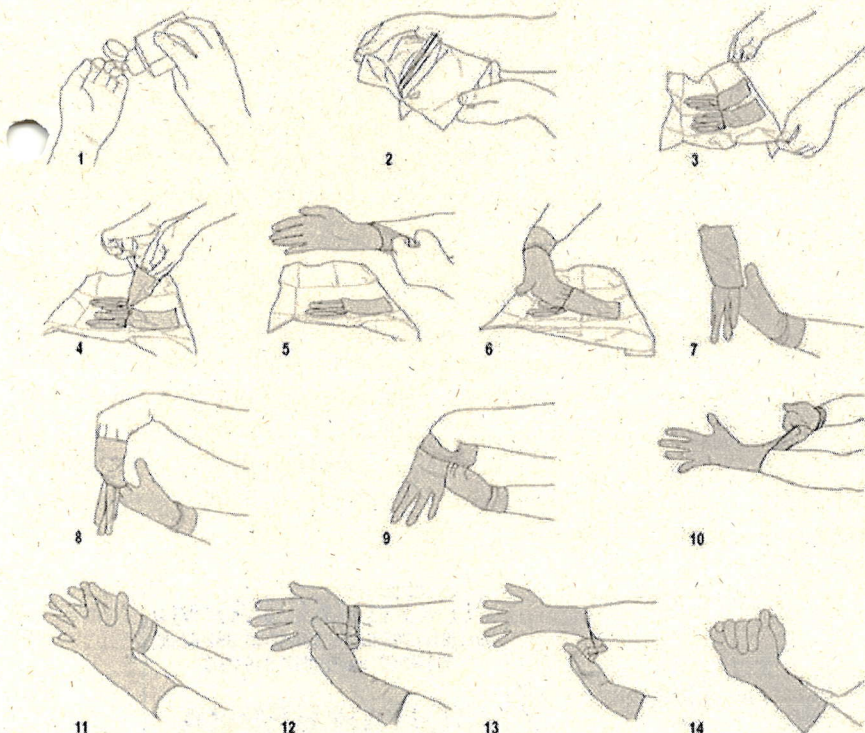

- 1 Выполните гигиену рук, выполнив либо гигиеническую антисептику рук, либо помыв руки.
- 2 Проверьте упаковку на целостность. Разорвите по шву внешнюю индивидуальную упаковку, чтобы увидеть внутреннюю стерильную упаковку.
- 3 Достаньте пинцетом внутреннюю стерильную упаковку и поместите на чистую сухую поверхность. Откройте упаковку, расправив края, чтобы она осталась открытой.
- 4 Используя большой и указательный пальцы одной руки, аккуратно ухватите сложенную манжету на уровне запястья.
- 5 Вставьте другую руку в перчатку одним движением, придерживая сложенную манжету на уровне запястья.
- 6-7 Возьмите вторую перчатку, просунув пальцы руки в перчатке под манжету второй перчатки.


8-10 Одним движением наденьте вторую перчатку на вторую руку, при этом избегая контакта руки в перчатке с поверхностями, кроме поверхности второй надеваемой перчатки.

11 Если есть необходимость, после надевания обеих перчаток, поправьте пальцы и межпальцевые пространства, пока перчатка не сядет удобно на руку.



12-13 Отверните манжету первой перчатки, легко скользнув пальцами другой руки по складке, избегая какого-либо контакта с любыми поверхностями, кроме поверхности перчатки.

14 Руки в перчатках должны дотрагиваться исключительно до стерильных приборов, или предварительно дезинфицированных частей тела пациента.


СПОСОБ НАДЕВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ПЕРЧАТОК НА ХИРУРГА

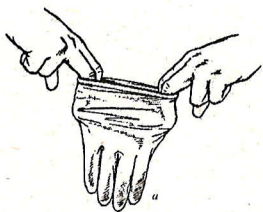

а) медицинская сестра отворачивает края стерильных перчаток в виде манжеток;

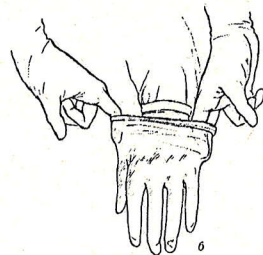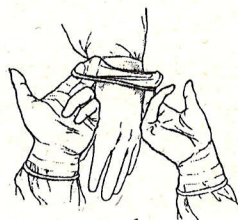


б) медицинская сестра вводит под отвернутые края четыре пальца обеих рук, растягивает ими перчатки и надевает их на руки хирурга;

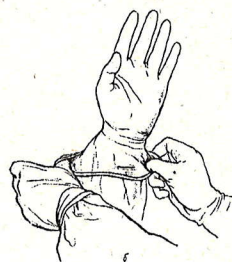


в) хирург, надев перчатки, поднимает кисти вверх.


ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ СНЯТИЮ СТЕРИЛЬНЫХ ПЕРЧАТОК

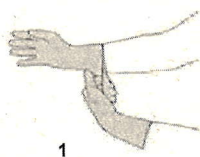

1

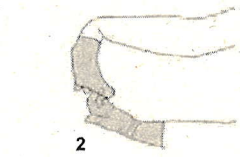

2

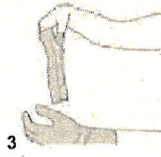


3



4



5

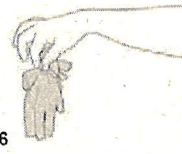

6

1-3 Снимите первую перчатку, отсоединив ее пальцами другой руки. Снимите перчатку, вывернув её наизнанку до второй фаланги пальцев (полностью не снимайте).

4 Снимите другую перчатку, натянув ее внешний край на кончики пальцев руки с частично снятой перчаткой.

5 Снимите перчатку, вывернув ее полностью наизнанку, чтобы убедиться, что кожа медицинского работника постоянно находится исключительно в контакте с внутренней поверхностью перчатки.

6 Утилизируйте перчатки в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Условия хранения: упакованные перчатки должны храниться в помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки транспортируются всеми видами крытых транспортных средств при температуре от минус 50°C до плюс 40°C. Использовать перчатки после транспортирования при минусовых температурах следует, выдержав их в упаковке в течение суток при температуре хранения. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину.

Срок годности стерильных перчаток – 3 года.





Изготовитель: УП «УНИКСФАРМ»

Республика Беларусь, 220108 г. Минск, ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к
тел: (+37517) 392-62-04, : (+37517) 392-62-05, факс: : (+37517) 318-29-87

Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM»

ТУ ВУ 190133324.003-2007

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование и варианты исполнений изделия медицинского назначения:

Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM»: хирургические латексные/нитриловые/синтетические, нестерильные, пудренные/непудренные, текстурированные/гладкие, типоразмеры: классические/повышенной прочности (ортопедические)/высокотехнологичные повышенной тактильной чувствительности/высокотехнологичные для экстренных манипуляций/с удлиненной манжетой/двойные.

Меры предосторожности:

Не использовать при нарушении целостности перчаток.

Латексные перчатки изготовлены из натурального латекса, который может вызывать аллергическую реакцию.


Указания по применению:

Перчатки предназначены для изоляции рук, обеспечивая необходимый уровень защиты пациента и пользователя во время проведения различных медицинских манипуляций.

Перчатки имеют следующие стандартные размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5.

Хирургические перчатки разделяются на левую и правую руку. Перчатки ОДНОРАЗОВЫЕ, повторное использование запрещено. Ногти должны быть коротко подстрижены. На руках должны отсутствовать предметы, которые могут нарушить целостность перчаток. Внимательно подбирайте размер перчаток. Медицинские перчатки должны плотно прилегать к рукам. Следует оберегать перчатки от механических повреждений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО НАДЕВАНИЮ ПЕРЧАТОК

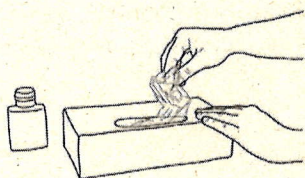


1. Достаньте правую/левую перчатку из упаковки.




2. Прикасайтесь только к той части перчатки, которая будет находиться на запястье (верхний край манжеты).



3. Наденьте правую/левую перчатку

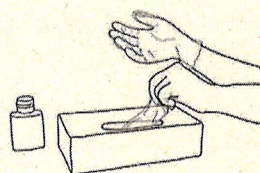

4. Возьмите вторую левую/правую перчатку рукой без перчатки, при этом прикасайтесь к той части перчатки, которая будет находиться на запястье.

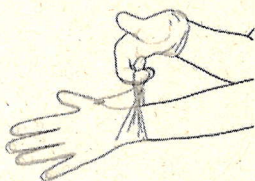


5. Чтобы избежать прикосновения руки к надетой перчаткой к коже предплечья, выверните наружную поверхность перчатки так, чтобы надеть ее на согнутые пальцы руки в перчатке, это позволит вам надеть вторую перчатку.




6. После того, как перчатки надеты, нельзя прикасаться к любым объектам внешней среды, контакт с которыми является показанием для смены перчаток.




ИНСТРУКЦИЯ ПО СНЯТИЮ ПЕРЧАТОК

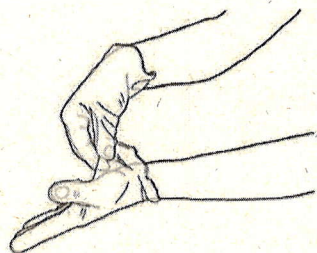

1. Захватите пальцами одну перчатку на уровне запястья, чтобы снять ее, не притрагиваясь к коже предплечья, стягивайте ее с руки так, чтобы перчатка вывернулась наизнанку.

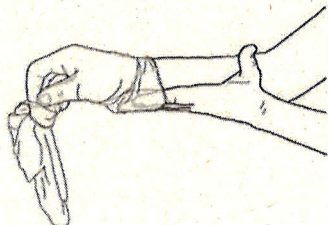

2. Держите снятую перчатку в руке с надетой перчаткой, подведите пальцы руки, с которой снята перчатка, внутрь – между второй перчаткой и запястьем. Снимите вторую перчатку, скатывая ее с руки, и вложите в первую перчатку.

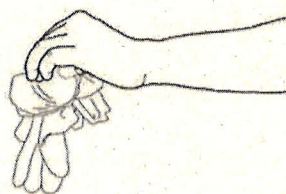

3. Утилизируйте перчатки в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Условия хранения: упакованные перчатки должны храниться в помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки транспортируются всеми видами крытых транспортных средств при температуре от минус 50°C до плюс 40°C. Использовать перчатки после транспортирования при минусовых температурах следует, выдержав их в упаковке в течение суток при температуре хранения. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину.

Срок годности нестерильных перчаток – 3 года.



Изготовитель: УП «УНИКСФАРМ»

Республика Беларусь, 220108 г. Минск, ул. Корженевского, 14 литер 3 1/к
тел: (+37517) 392-62-04, : (+37517) 392-62-05, факс: : (+37517) 318-29-87

Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM»

ТУ ВУ 190133324.003-2007

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наименование и варианты исполнений изделия медицинского назначения:

Перчатки медицинские одноразовые «UNIXFARM»: хирургические латексные/нитриловые/синтетические, стерильные, пудренные/непудренные, текстурированные/гладкие, типоразмеры: классические/повышенной прочности (ортопедические)/высокотехнологичные повышенной тактильной чувствительности/высокотехнологичные для экстренных манипуляций/с удлиненной манжетой/двойные.

Меры предосторожности:

Не использовать при нарушении целостности перчаток и упаковки.

Латексные перчатки изготовлены из натурального латекса, который может вызывать аллергическую реакцию.

Указания по применению:

Перчатки предназначены для изоляции рук, обеспечивая необходимый уровень защиты пациента и пользователя во время проведения различных медицинских манипуляций.


Перчатки имеют следующие стандартные размеры: 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5.

Хирургические перчатки разделяются на левую и правую руку. Перчатки ОДНОРАЗОВЫЕ, повторное использование запрещено. Ногти должны быть коротко подстрижены. На руках должны отсутствовать предметы, которые могут нарушить целостность перчаток. Внимательно подбирайте размер перчаток. Медицинские перчатки должны плотно прилегать к рукам. Следует оберегать перчатки от механических повреждений.

ВНИМАНИЕ! Стерильность гарантирована, если пакет не открыт или не имеет повреждений.

ВНИМАНИЕ! Перед применением пудренных перчаток опудривающее вещество должно быть удалено с поверхности в стерильных условиях до проведения процедур, чтобы свести к минимуму риск возникновения нежелательных реакций на тканях.

ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ НАДЕВАНИЮ СТЕРИЛЬНЫХ ПЕРЧАТОК

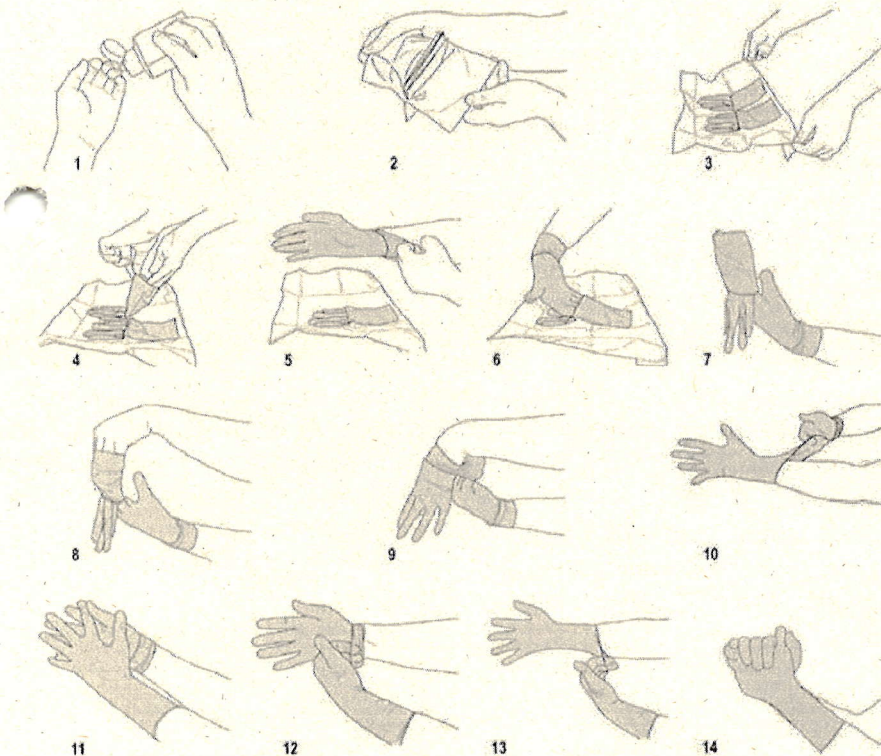

- 1 Выполните гигиену рук, выполнив либо гигиеническую антисептику рук, либо помыв руки.
- 2 Проверьте упаковку на целостность. Разорвите по шву внешнюю индивидуальную упаковку, чтобы увидеть внутреннюю стерильную упаковку.
- 3 Достаньте пинцетом внутреннюю стерильную упаковку и поместите на чистую сухую поверхность. Откройте упаковку, расправив края, чтобы она осталась открытой.
- 4 Используя большой и указательный пальцы одной руки, аккуратно ухватите сложенную манжету на уровне запястья,
- 5 Вставьте другую руку в перчатку одним движением, придерживая сложенную манжету на уровне запястья.
- 6-7 Возьмите вторую перчатку, просунув пальцы руки в перчатке под манжету второй перчатки.

8-10 Одним движением наденьте вторую перчатку на вторую руку, при этом избегая контакта рук и перчаток с поверхностями, кроме поверхности второй надеваемой перчатки.



11 Если есть необходимость, после надевания обеих перчаток, поправьте пальцы и межпальцевые пространства, пока перчатка не сядет удобно на руку.



12-13 Отверните манжету первой перчатки, легко скользнув пальцами другой руки по складке, избегая какого-либо контакта с любыми поверхностями, кроме поверхности перчатки.

14 Руки в перчатках должны дотрагиваться исключительно до стерильных приборов, или предварительно дезинфицированных частей тела пациента.


СПОСОБ НАДЕВАНИЯ СТЕРИЛЬНЫХ ПЕРЧАТОК НА ХИРУРГА



а) медицинская сестра отворачивает края стерильных перчаток в виде манжеток;

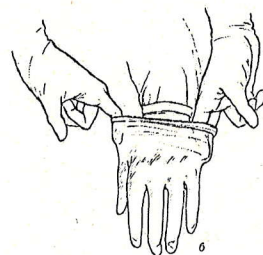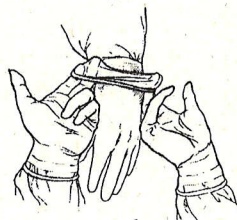


б) медицинская сестра вводит под отвернутые края четыре пальца обеих рук, растягивает ими перчатки и надевает их на руки хирурга;

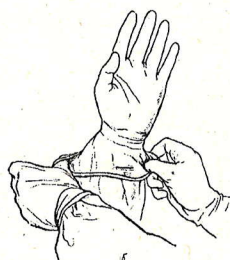


в) хирург, надев перчатки, поднимает кисти вверх.


ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ СНЯТИЮ СТЕРИЛЬНЫХ ПЕРЧАТОК

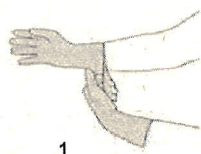

1

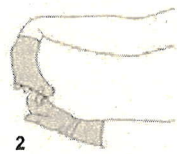

2

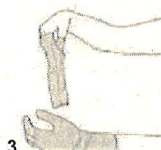

3



4



5



6

1-3 Снимите первую перчатку, отсоединив ее пальцами другой руки. Снимите перчатку, вывернув её наизнанку до второй фаланги пальцев (полностью не снимайте).

4 Снимите другую перчатку, натянув ее внешний край на кончики пальцев руки с частично снятой перчаткой.

5 Снимите перчатку, вывернув ее полностью наизнанку, чтобы убедиться, что кожа медицинского работника постоянно находится исключительно в контакте с внутренней поверхностью перчатки.

6 Утилизируйте перчатки в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Условия хранения: упакованные перчатки должны храниться в помещении при температуре от 0 до 25°C и относительной влажности воздуха не более 85%. Перчатки транспортируются всеми видами крытых транспортных средств при температуре от минус 50°C до плюс 40°C. Использовать перчатки после транспортирования при минусовых температурах следует, выдержав их в упаковке в течение суток при температуре хранения. Перчатки в процессе хранения должны быть защищены от действия прямых солнечных лучей и находиться на расстоянии не менее 1 метра от теплоизлучающих приборов, не должны подвергаться воздействию масел, бензина, керосина и других веществ, разрушающих резину.

Срок годности стерильных перчаток – 3 года.